

TILLET

日本製

取扱説明書


【保証書付】保証書はこの取扱説明書の裏表紙についております。

このたびはTILLETをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。
本書はいつもお手元においてご利用ください。

株式会社 渡久クリエイティブブランド WQC
のその他の商品をご覧になりたい方は
下記 OFFICIAL WEB SHOP へアクセス
をお持ちしております。

<https://wqc.thebase.in/items/25551305>

WQC
Beauty Tech Lab

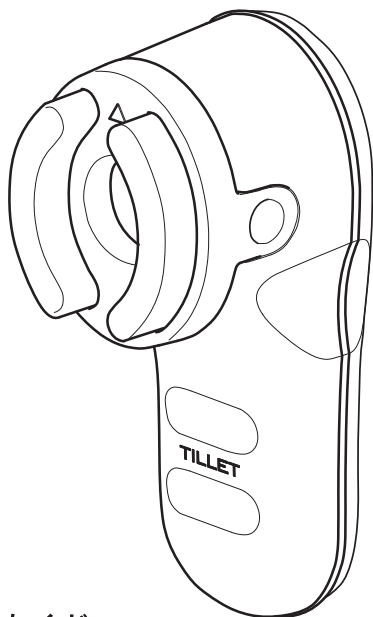

もくじ

安全上のご注意-----	1
安全にお使いいただくために---	1
TILLETの特長-----	4
同梱物と各部の名称 -----	4
本機の使用法-----	5
フェイスアタッチメントの取付 --	6
充電のしかた -----	6
使用後の保管と管理方法 -----	6
フェイストリートメントの方法 --	7
ヘアトリートメントの方法-----	9
よくある質問(Q & A) -----	11
トラブルシューティング-----	13
保証とアフターサービス-----	14
定格・仕様-----	14
保証書-----	裏表紙

ご使用の前に

使いかた

よくある質問
保証書

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの方々への危害や事故を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は下記のように区分し、内容を定義しています。
いずれも安全に関する内容ですので必ずお守りください。
- 本製品は医療機器ではありません。必ず美容目的としてご使用ください。

【表示の説明】

 危険	取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容。
 警告	取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
 注意	取り扱いを誤った場合、人が障害を負う可能または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容。
 禁止	この記号は「禁止」の行為であることを示します。
 強制	この記号は行為を「強制」/「指示」することを示します。

安全にお使いいただくために

本製品をお使いになる前に必ず本取扱説明書をお読みください。
お読みにならないで操作した時は、製品の故障や重大な問題を発生させる可能性があります。

【方法】

本製品に関する注意事項を以下に記載しますので内容を確認なさり必ずお守りください。

 危険	
 禁止	- 本製品を火中投下 / 加熱 / 高温で充電、使用、放置をしないでください。 発熱 / 発火 / 破裂の原因となります。 - 本製品 / 充電器を浴室やサウナなどで使用しないでください。 また、濡れた手で触る / 水没 / 水洗いをしないでください。 感電 / 発火 / 故障 / ショートの恐れがあります。

警告



禁止

- ・ 分解 / 改造などをおこなわないでください。
- ・ ペースメーカーなどの体内植込み型医療電子機器との併用は誤作動を招く恐れがありますのでご使用しないでください。
- ・ 人工心肺などの生命維持用機器との併用は誤作動を招く恐れがありますのでご使用しないでください。
- ・ 心電計などの装着型の医療電子機器との併用は誤作動を招く恐れがありますのでご使用しないでください。
- ・ 次の項目に該当する場合は使用しないでください。
事故やトラブルの恐れがあります。
 - ・ 急性疾患の方
 - ・ 心臓疾患の方
 - ・ 有熱性疾患の方
 - ・ 血圧異常の方
 - ・ 感染症疾患の方
 - ・ 結核性疾患の方
 - ・ 悪性腫瘍(しゅよう)のある方
 - ・ 妊娠中または妊娠している可能性のある方
 - ・ 生理中の方
 - ・ 医師に本製品の使用を禁止された方
 - ・ 特に肌や頭皮が敏感な方
 - ・ 血友病疾患の方
 - ・ ステロイド系抗炎症薬の長期使用や肝機能障害による毛細血管拡張を起こしている方
 - ・ 飲酒時や薬を服用中の方
 - ・ 疲労の激しい方
 - ・ 化学繊維でかぶれた経験のある方
 - ・ 日焼けによる炎症を起こしている方
 - ・ 適応部位に炎症 / 傷 / 異常のある方
 - ・ 眼 / 眼球周りの皮膚に炎症、傷、異常のある方
 - ・ 健康が優れない方
- ・ 下記の部位には使用しないでください。
事故や肌 / 身体のトラブルの恐れがあります。
 - ・ 整形手術をした部位
 - ・ 口の中などの粘膜
 - ・ 眼球 / まぶた / 耳
 - ・ 感覚 / 知覚障害を起こしている部位
 - ・ 顔面黒皮症を起こしている部位
 - ・ 湿疹 / かぶれ / ニキビ / 吹き出物など炎症を起こしている部位
 - ・ 金属 / プラスチック / シリコンなどを埋め込んである部位
 - ・ かゆみ / ホコリ / 物理的刺激などによる炎症 / シミ (色素沈着) などのある部位
- ・ 子供の手の届く場所に保管しないでください。
事故やトラブルの恐れがあります。

⚠ 警告

 禁止	・本製品を落としたりぶつけたりしないでください。 また、破損した製品を使用しないでください。 事故やトラブルの恐れがあります。 ・本製品と電気刺激機器を重複して使用しないでください。 ・本製品の赤色 LED ライトを直接見ないでください。 事故や失明の恐れがあります。 ・製品が作動している状態でタオルや布などに包まないでください。 内部温度の上昇により故障や火災の原因となります。
 強制 (必ず守る)	・痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止してください。 ・使用時間や使用頻度は必ず取扱説明書の指示を守ってください。 ・使い始めの敏感肌の方は、使用時間を短めにして様子を見ながら使用してください。 ・異常/故障時は直ちに使用を中止し、各販売店へ修理/点検を依頼してください。

⚠ 注意

 禁止	・湿気・ホコリの多い場所では保管しないでください。 製品の寿命が短縮する場合があります。 ・化学溶液（ベンジン / アセトリン / シンナー）などで製品を拭かないでください。故障の原因や製品表面を変化させる可能性があります。 ・コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。 ・本製品の充電部分および LED 部分に水や化学溶液（化粧水や美容液）などを接触させないでください。
 強制 (必ず守る)	・本製品を充電する際は必ずスイッチを切った状態で行ってください。 ・本製品に使用する付属品は必ず当社指定製品をご使用ください。 故障を招く恐れがあります。

TILLET の特長

「イオン導入」

- ・イオン電荷の性質を利用して、美容成分をお肌の奥まで届けます。

「エレクトロポレーション」(電気穿孔法)

- ・特殊パルス波形でエステサロンで使用されている機器と同じような働きをご自宅で体感できます。

「EMS」

- ・微弱電流による電気刺激を筋肉へ届けます。


「赤色 LED ライト」

- ・620～632nm の可視光線で、お肌と頭皮を健やかに保ちます。

「バイブレーション」

- ・毎分 8,000 回の振動でお肌をマッサージします。

同梱物と各部の名称

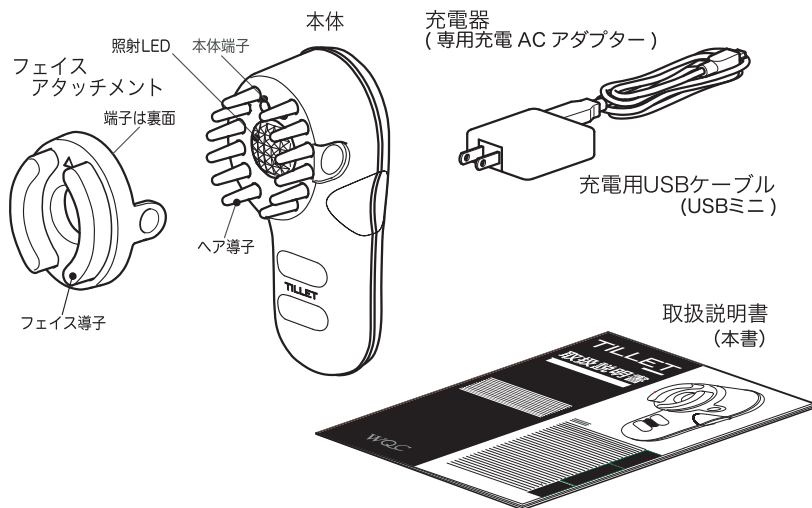

本機の使用法

【ご使用に際しての注意事項】

- ・安全に正しくお使いいただくために、この使用法を必ずお読みください。
- ・ご使用前にピアスやネックレスなどの装飾品は全て外してください。
- ・照射 LED の光線を直接見ないでください。
- ・使用回数／使用間隔は 1 回 1 部位 10 分を目安としてください。
連続使用は 20 分とし 1 日 2 回まで。顔の場合は顔全体で 1 回 5 分程度を推奨。
- ・エレクトロポレーションは週 2 回としてください。

【ご使用の前に】

電源ボタンを押してイオンとレベル 1 の LED の点灯を見て充電状況を確認してください。充電式電池の容量が無くなったか少なくなった場合は「電池」の LED が点滅しますので充電してください。

※充電方法は 6 ページ **充電のしかた** をご確認ください。

【ボタンの操作】

〈操作シート〉

⑤ LED ボタン

レベル表示


モード表示

電池表示

・電池残量が少なくなると点滅

充電表示

・充電中に点灯
完了すると消灯

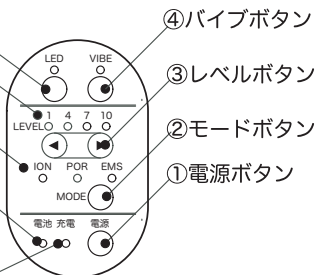

④ バイブボタン

③ レベルボタン

② モードボタン

① 電源ボタン

① 電源ボタンを押す

イオンとレベル 1 の LED が点灯し操作できる状態になります。

② モードボタンで施術の目的に合わせモードを選択します。

選択したモードの LED が点灯

③ レベルボタンで希望のレベルを設定

レベルの LED 表示は左図のようになっています。

レベルは⑥がアップ④がダウン

します。電源を入れた時から作動が始まります。

④ バイブボタンを押してバイブレーションを開始

ボタンを押す毎に連続 / 中断 / 停止を繰り返します。

⑤ LED ボタンを押して LED 照射

バイブボタンと同様にモードとは関連せず単独で使用できます。

※フェイス / ヘアのトリートメントは 7 ページ / 9 ページの方法に従ってご使用ください。

⑥ 電源ボタンを押して電源を切りトリートメントを終了

表示の LED が全て消灯します。

【レベルボタンの操作とレベル表示】


レベル LED 点灯状態 点灯 ○ 点滅 ● 速い点滅 ⊙

レベル

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

電源ボタン押下

⑤ ボタン押下

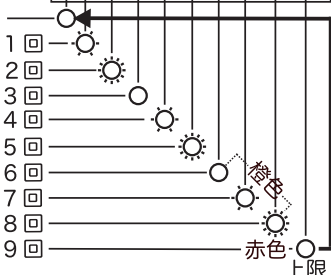


Ⓔ 設定したレベルよりアップする

Ⓕ 設定したレベルよりダウンする

フェイスアタッチメントの取付


- ・フェイスアタッチメントの△マークを上にし図のように縁部分を持ち、互いの端子先端が合うように左右の袖部分を本体の左右の凹みにしっかりはめます。
- ・外す際も同様に縦に縁部分を持ち、真っすぐ引き抜いてください。

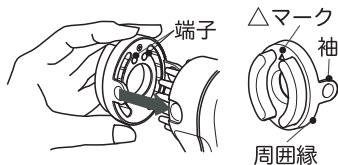

充電のしかた

【充電方法】

- ・専用充電 AC アダプターと充電用 USB ケーブル (USB ミニ) を使い、本体下部分の差込口にジャックを差し込みます。
- ・充電しながらでも使用ができますが、バッテリーの消耗を早める恐れがあります。

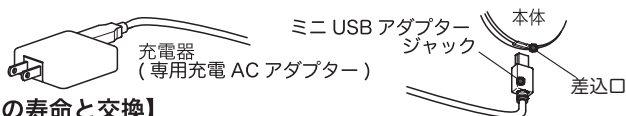

【バッテリーの寿命と交換】

寿命: 1週間に一回の充電で約3年程度。(ただし保証期間は1年) また、充電完了後、極端に使用時間が短くなった場合は、3年以内でも交換時期と考えられます。

使用後の保管と管理方法

- ① ご使用後は必ず本体の電源スイッチを切り使用前の状態に戻してください。
- ② 保管場所・湿気の無いところに保管してください。
 - ・気圧 / 気温 / 湿度 / 日光 / ホコリ / 塩分 / イオンなどを含んだ空気などによって機器に悪影響を及ぼす可能性のある場所には保管しないでください。
 - ・傾斜 / 振動 / 衝撃などの安全状態に注意してください。
 - ・化学薬品 / それらの保管場所やガス発生場所に保管しないでください。
 - ・本製品および充電器は清潔にしてください。
- ③ ご使用後のお手入れは本体表面は乾いた布で軽く拭き、水気や液体が内部に入らないようにしてください。
腐食性のある溶液 / 洗剤などで拭かないでください。
ステアライザー (紫外線消毒器) などでの殺菌はできませんのでご注意ください。
使用後は毎回、エタノールを含ませた布でフェイス導子とヘア導子 / 両端子部分を優しく入念に拭き、油分 / 美容液や養毛剤を拭き取ってから保管してください。
- ④ 本製品は必ず定期的に点検を行ってください。
長期に渡って使用していない製品を使用する際には、充電の状態および正しく作動するかをご確認の上ご使用ください。
- ⑤ 保管に適した温度湿度の環境は -20℃～50℃ / 相対湿度 10%～70% です。
- ⑥ 廃棄の方法は各自自治体の方法に従ってください。

フェイストリートメントの方法

【トリートメントの前に】

- ・使用時間は顔全体で5分程度としてください。
- ・頭皮に比べ、顔の皮膚は電気刺激や摩擦などに敏感な事にご留意ください。
- ・6ページの**フェイスアタッチメントの取付**を参照してフェイスアタッチメントをお取付けください。
- ・フェイスアタッチメントが本体に正しく設置されている状態でご使用してください。
※フェイスアタッチメントの上下の向きにご注意ください。

【トリートメントのしかた】

- ・お手入れする箇所には、日ごろお使いの化粧水や美容液を使用し、使用することに塗布し、必ず濡れた状態でご使用ください。
お肌に美容液などが吸収されてしまっている状態ですとフェイス導子の導通が不十分になります。
※アルコール分の少ないものをお使いください。
 - ・お顔にフェイスアタッチメントの左右のフェイス導子が当たっている状態で動かしてください。
※左右のフェイス導子が同時にお肌に触れていないと導通しません。
※適度な電気刺激を感じる程度で使用し、弱すぎる、または強すぎる場合はその都度刺激レベルを調整してください。
1. 先ず、操作シートのモードボタンでイオンあるいはポレーションにセットし、導入を3～4分おこないます。
レベルは5ページの**【ボタンの操作】**を参考に操作してください。
レベルを設定した時点で作動が始まります。
 2. 次にEMSに切り替えてください。
- ・終了しましたら電源ボタンを押し、電源を切ります。
 - ・使用後は毎回、エタノールを含ませた布でフェイス導子と両端子部分を優しく入念に拭き、油分/美容液などを拭き取ってから保管してください。

【各部位のトリートメントのしかた】

右図を参考に各部位にご使用ください。

リフトアップ




左右口角近くから
目尻に向けて
持ち上げるように
こめかみは内側から
生え際まで

目の下



涙袋の下を中心
から外側に

ひたい

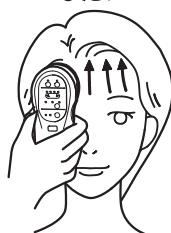

髪の生え際を軽く
引き上げ下から上
に向かってゆっくり

ほうれい線



ほうれい線に
沿って上下に

涙袋



涙袋にそって
左右に

小鼻




小鼻に沿って
上下に

フェイスライン



顔の中央部から
髪の生え際まで

首のライン

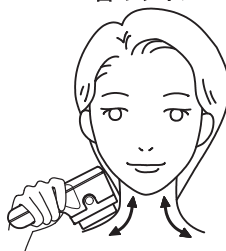

アゴの下から
耳下腺のラインを
上から下、肩にかけて

ヘアトリートメントの方法

【ヘアトリートメントの前に】

- ・使用時間は1回1部位に10分程度とし、1回の連続使用20分、1日20分を2回までにしてください。
- ・刺激の感じ方には個人差があります。刺激強度を確認しながらご使用ください。
- ・ご使用前に頭皮をよく洗い、汚れを落とした後にタオルドライをしっかりとこねってからご使用ください。

【ヘアトリートメントのしかた】


- ・清潔な頭皮に養毛剤や水分を塗布して、まんべんなく揉み込んでからヘア導子を当てていきます。
- ・ヘア導子12本の先端がなるべく垂直に頭皮に接触するようにしてください。接触が不安定ですと電気刺激を強く感じる場合がありますので、頭皮から浮かさず、刺激が過度にならないように注意して、確実に当てるようにしてください。
- ※押し当てすぎると、ヘア導子先端の劣化を早める原因となりますのでご注意ください。
- ・ピリピリとした電気刺激を少し感じる程度で使用します。刺激が弱すぎる、または強すぎる場合は、その都度レベルを調整してください。
- ※水分や油分がヘア導子に付着することでヘア導子の導電性が失われ電気刺激が減少します。
- ※お手待ちの整髪剤などを使用する場合は、トリートメント使用後にお使いください。

【各部位のトリートメントのしかた】

1. 先ず、操作シートのモードボタンでポレーションにセットし、導入を3～4分おこないます。
レベルは5ページの**【ボタンの操作】**を参考に操作してください。
レベルを設定した時点で作動は始まります。
 2. 次にモードボタンでEMSに切り替え、同様に5分程施術を行なってください。
- ・終了しましたら電源ボタンを押し、電源を切ります。
 - ・使用後は毎回、エタノールを含ませた布でヘア導子 / 両端子部分を優しく入念に拭き油分 / 養毛剤などを拭き取ってから保管してください。

右図を参考に各部位の施術を行ってください。

生え際から頭頂部／耳周辺

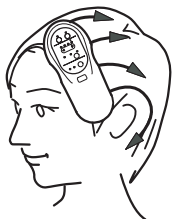


生え際から頭頂までは皮脂が多く出やすいところです。
生え際から頭頂までゆっくり動かしていきます。

耳周辺から頭頂部




耳周りはリンパが集中しているところなので、汚れが溜まりやすい場所です。
耳の下あたりから髪をすくうように地肌を持ち上げ、頭頂に向けて地肌を動かしほぐしていきます。

襟足から頭頂部

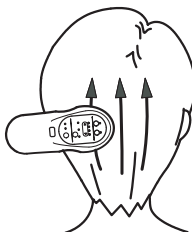

頭頂部は頬を持ち上げて顔全体を支えている部分です。
首のつけ根から頭頂部までゆっくり上に動かします。

頭頂部

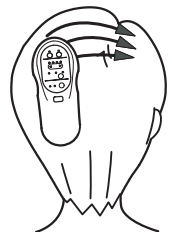

頭頂は紫外線にあたりやすくダメージが大きい場所です。
左右からゆっくり動かします。

よくある質問 (Q & A)

お客様からよくいただく質問と、回答を記載しています。

Q1	顔と頭皮以外にも使用は可能ですか？
	はい。TILLET はお顔と頭皮以外にもご使用いただけます。
Q2	1 日に何回使ってもいいのですか？
	1 回 1 部位に対して 10 分推奨で 1 回の連続使用時間は 20 分とし 1 日 2 回まで推奨です。
Q3	乾いた顔や頭皮に使用してもいいですか？
	基本的にはお顔や頭皮に化粧水やケア剤を塗布してからのご使用となります。
Q4	手持ちの化粧水や乳液、頭皮ケア剤を使用しているのですか？
	はい。当社から専用の付属剤は出しておりません。 お客様が普段お使いのものを効果を見ながらご使用ください。
Q5	電池は交換できますか？
	ご自分での交換はできません。6 ページ【バッテリーの寿命と交換】 13 ページ【トラブルシューティング】をお読みいただき、交換の必要が生じた場合は、保証書記載の販売店様にご依頼ください。
Q6	充電しながら使用しても大丈夫ですか？
	はい。問題ありません。 出荷直後フル充電時の連続使用時間は使い方に依りますが約 5 時間となります。
Q7	刺激が強すぎて使用できません。
	刺激が強い場合は、レベル調整 (10 段階) とお肌や頭皮に塗布する液剤の量で調整をしてください。 それでも刺激が強い場合は、ご使用をお控えください。

Q8	アクセサリはつけたままで使えますか？
	いいえ。ピアスやネックレスなどの装飾品は全て外してからご使用ください。
Q9	海外で使用できますか？
	はい。ACアダプター /USB ケーブルともに入力 100-240Vに対応しています。電源プラグを各国の規格に変換してご使用ください。
Q10	購入当初より電気刺激が弱く感じるのですが。
	1. 充電状態により弱く感じる場合があります。 フル充電にしてからご使用ください。 2. 水分や油分が各導子やフェイスアタッチメントの端子部分に付着することで、伝導性が失われ電気刺激が減少します。 本機が汚れていない清潔な状態でご使用し、ご使用後は毎回エタノールを含ませた布で優しく汚れをふき取ってください。

トラブルシューティング（修理を依頼される前に）

下記のような症状がある場合は、まず以下の内容を確認してください。

1	電源が入らない。
	1. バッテリーの充電が切れていませんか？ 約 10 時間の充電で約 5 時間の使用が可能です。 2. リセット機能をお試しください。 充電器を本機ソケットに一度差し込んで抜き取ります。 内部のコンピュータへ信号が送信され、リセットされます。
2	フェイスアタッチメント装着時に電気が通じない。
	フェイスアタッチメントの装着向きが正しいかご確認ください。 フェイスアタッチメントを本体アタッチ面正面に矢印が有る方を上に本体へしっかりと装着してください。 また、裏面の端子 2 つが汚れていると、本体との設置で障害が出ますので、必ず定期的に点検し汚れを落としてください。
3	フェイスアタッチメントからカラカラ音がする。
	異常ではなく、アタッチメント内部の動作によるものです。 本機とアタッチメントの設置密着度を保つための設計です。
4	突然電源が切れた。
	お客様の電源消し忘れによる本製品の経年劣化を抑止するためタイマーがはたらき 10 分で自動的に電源が切れます。 10 分タイマーで電源が切れた場合は、再度電源を入れてください。
5	以前より電気刺激が弱く感じる。
	充電状態により刺激が弱く感じる場合があります。 フル充電状態にしてからご使用ください。 また、電気刺激への慣れや体調によっては電気刺激が弱く感じたり肌や機器の汚れの状態によっても刺激の感じ方が異なる場合もあります。
6	フル充電時に勝手に電源が入る。
	フル充電時に自動的に電源が入ることがありますが 10 分タイマーがはたらき 10 分で自動的に電源は切れます。 不具合ではありません。

※トラブルシューティングの内容を確かめても症状が改善されない場合は保証書記載のご購入いただいた【店舗様】へご連絡ください。

保証とアフターサービス

使い方 / お手入れ / 修理に関しては、【ご購入いただいた店舗様】へご相談ください。

製品は万全を期して製造していますが、万一不具合がございましたら11 ページ【よくある質問】および 13 ページ【トラブルシューティング】をご確認後、【ご購入いただいた販売店】でも問題が解決されない場合、また転居や贈答品などでお困りの場合はお手元に下記の内容をご準備の上、


- ・ご購入日
- ・ご購入先販売店
- ・ご購入者様情報（お名前、ご住所、ご連絡先）
- ・保証書の有無
- ・シリアル番号（保証書、本機の化粧箱に記載）
- ・故障の状況（できるだけ具体的に）

株式会社渡久クリエイトカスタマーサポート：<https://wqc.jp>

までご連絡ください。

定格・仕様

商品名	TILLET(ティレット)
電 源	充電式リチウム電池 7.4V
照射LED	可視光線：620～632nm
振動数	8,000 回 / 分以上
防 水	生活防水
重 さ	150 g（電池含む）
材 質	本体 ABS 塗装仕上げ 導子 ABS 硬化3価クロムめっき LEDレンズカバー ポリスチレン
付属品	充電用 AC アダプター USB ケーブル （両品とも100～240V対応） 取扱説明書

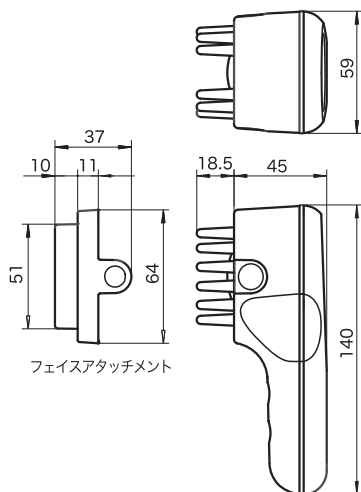

TILLET保証書

TILLETをご購入いただきましてありがとうございます。

本書はご購入の日から下記期間中に故障が発生した場合には、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

ご記入いただく個人情報の利用目的は下記に記載しております。

【無料保証規定】

- 取扱説明書などの注意事項や禁忌事項に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、ご購入日より1年間無料保証とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有償修理とさせていただきます。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改良による故障および損傷
 - ご購入後の輸送、落下などによる故障および損傷
 - 火災/地震/水害/落雷/その他天変地異および公害/塩害/ガス害(硫化ガスなど)異常電圧/指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - 車両/船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - 電池の消耗または摩耗した部品交換
 - 本書にご購入の年月日/お客様氏名/販売店名の記入のない場合、または記載内容を書き換えられた場合
 - 中古品および個人販売、またはネットオークションなどで購入された場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしません。ご購入年月日が記載された領収書などの明細書と共に大切に保管してください。

TILLET 保証書

商品名	TILLET	保証期間	本体ご購入より1年間
製品番号	S/N	ご購入日	年 月 日
ご購入者	お名前 (印)		
	ご住所		
	お電話 ()		
販売店	販売店名		
	住所		
	電話 ()		

製造販売元 株式会社渡久クリエイト
〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本 3-10-9
株式会社渡久クリエイトカスタマーサポート <https://wqc.jp>